

ЛАДОМИР



Весы напольные
электронные модель НА103

Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку напольных весов Ладомир.
Надеемся, что они прослужат Вам долго
и будут радовать Вас безупречной работой.


Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к выходу изделия из строя, а также нанести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание

Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Установка и замена элементов питания	5
Выбор единиц измерения	5
Эксплуатация изделия	5
Уход и чистка	6
Таблица неисправностей	6
Технические характеристики	6
Гарантия и сервисное обслуживание	7

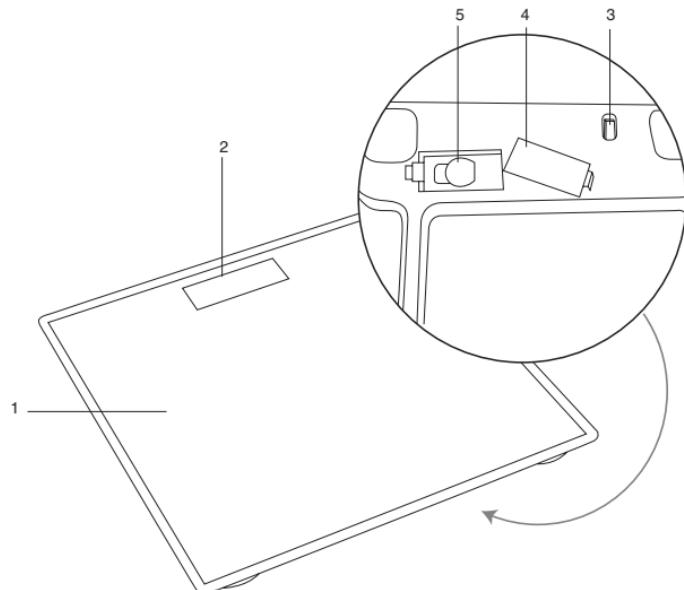

Комплектация изделия:

- Весы напольные электронные
- Элемент питания 3В (CR2032) –1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
- Гарантийный талон
- Сертификат «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Корпус
2. Дисплей
3. Переключатель единиц измерения
4. Крышка батарейного отсека
5. Элемент питания

Меры безопасности

- Изделие предназначено для использования исключительно в бытовых целях.
 - Не подвергайте изделие ударным нагрузкам. Не прыгайте на весах и не перегружайте их.
- Внимание!** Максимально допустимая нагрузка на весы –150 кг. Символ «Er» предупреждает о перегрузке весов. При появлении символа «Er» на дисплее освободите весы от нагрузки. Превышение нагрузки может привести к поломке изделия.
- Избегайте попадания воды на весы, так как мокрая поверхность корпуса становится опасно скользкой.
 - Используйте весы вдали от нагревательных приборов.
 - Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, так как изделие не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не

допускайте контакта корпуса весов с водой либо с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода изделия из строя.

- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
 - Если Вы не планируете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элемент питания из батарейного отсека.
- Внимание!** При установке элемента питания строго соблюдайте полярность в соответствии с маркировкой на корпусе.
- Своевременно меняйте элемент питания. Если на дисплее весов появился символ индикации низкого заряда батарейки «Lo», необходимо заменить элемент питания.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие. При обнаружении неисправностей обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Установка и замена элементов питания

- Перед первым включением изделия удалите защитную пленку из батарейного отсека.
- Для замены элемента питания откройте крышку батарейного отсека.
- Извлеките элемент питания из батарейного отсека.
- Соблюдая полярность, установите элемент питания в батарейный отсек. Закройте крышку.

Выбор единиц измерения

- На обратной стороне корпуса изделия находится переключатель единиц измерения. Последовательно нажимая на него, выберите требуемую систему измерения - kg, lb (кг/фунты)

Эксплуатация изделия

- Установите весы на ровную, твердую и плоскую горизонтальную поверхность. Не используйте весы, установленные на ковер или другие мягкие неустойчивые поверхности – это приведет к некорректным результатам.

Внимание! Если на дисплее появился символ «С» - произошла ошибка в измерении. Необходимо освободить весы от нагрузки, дождаться выключения изделия, затем повторить взвешивание. Если символ ошибки «С» высвечивается, и весы не выключаются длительное время, необходимо вытащить батарейку примерно на 3 секунды, затем вставить ее обратно.

- Для точного определения Вашего веса необходимо взвешиваться без верхней одежды, обуви, натощак и в одно и то же время.
- Весы включаются, когда Вы на них встаете. На дисплее появятся символы «0.0 kg» или «0.0 lb», в зависимости от выбранных единиц измерения.

- Встаньте на весы, стойте прямо, не опираясь на что-либо и ни к чему не прислоняйтесь. Дождитесь, когда показание стабилизируется.
- Ваш вес будет высвечиваться на дисплее 10 секунд, после чего изделие автоматически отключится.

Внимание! Для максимально точного определения веса необходимо, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая изделие, вы можете установить его на неровную поверхность, что повлияет на точность отображения веса.

Уход и чистка

- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, избыточной влаги ($\geq 80\%$), ударов и падений, пыли и прямых солнечных лучей.
- Регулярно протирайте изделие сначала слегка влажной тканью, затем корпус следует вытереть насухо. Не используйте абразивные вещества для чистки изделия.
- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.

Таблица неисправностей

	Индикация перегрузки
	Индикация низкого заряда элемента питания
	Индикация ошибки измерения

Технические характеристики:

Максимальный предел измерения: 150 кг
Цена деления шкалы – 0,1 кг
Элемент питания – 3В (CR2032)

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Весы электронные модель НА103

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

ЛАДОМИР

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.
КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ



EAC